




O2-MAX™

Dispositif de CPAP jetable

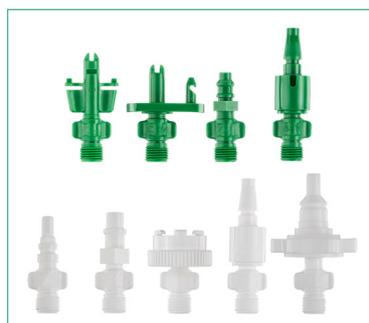


Soins Intensifs ▪ Pulmodyne®

O2-MAX™

La Pression Positive Continue (CPAP) est devenue un standard de soins pour les patients souffrant de détresse respiratoire. Le système O2-MAX peut délivrer jusqu'à 140 L/min de débit au patient, avec une FiO₂ de 30%. Grâce à l'adaptateur Trio, la FiO₂ peut être réglée à 30, 60, ou 90%.

Pour convenir à différents besoins, les systèmes de PEEP réglables proposent une version 3-SET™ (5, 7.5 et 10 cmH₂O) ou 5-SET™ (5, 7.5, 10, 12.5 et 15 cmH₂O). De plus, ce système entièrement jetable permet l'intégration d'un nébuliseur et d'un filtre, tout en maintenant un débit cohérent vers le patient.

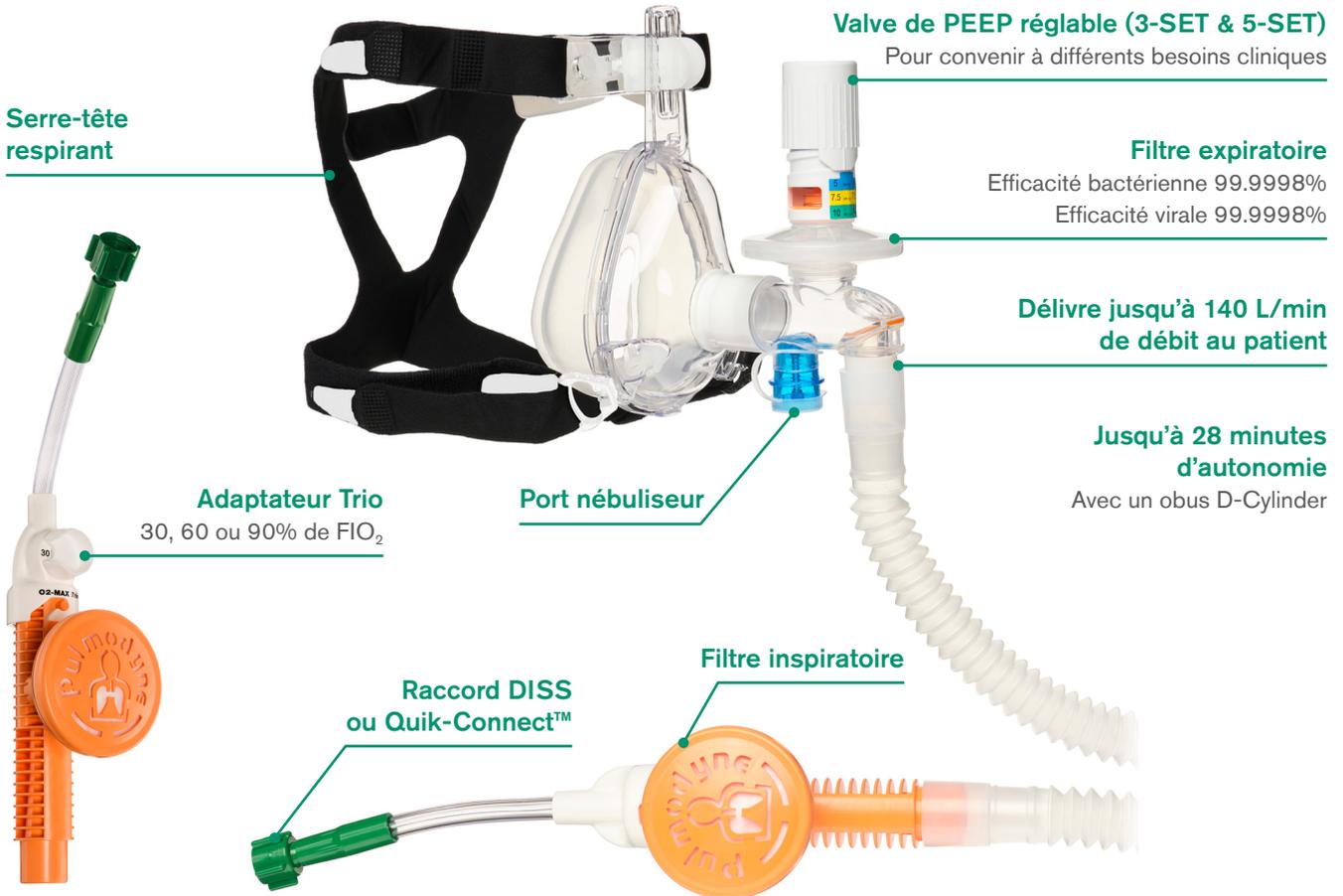

Accessoires O2-MAX

Référence	Description	Qté/bte
313-8000	O2-MAX Trio unité de contrôle	10
313-8300	O2-MAX filtre expiratoire	10
313-7716	O2-CPAP™ valve de PEEP à valeur fixe, 5.0 cmH ₂ O, bleu	10
313-7717	O2-CPAP valve de PEEP à valeur fixe, 7.5 cmH ₂ O, jaune	10
313-7718	O2-CPAP valve de PEEP à valeur fixe, 10.0 cmH ₂ O, vert	10
313-7719	O2-CPAP valve de PEEP à valeur fixe, 12.5 cmH ₂ O, rose	10
313-7720	O2-CPAP valve de PEEP à valeur fixe, 15.0 cmH ₂ O, rouge	10
313-7721	O2-CPAP valve de PEEP à valeur fixe, 20.0 cmH ₂ O, or	10
313-7725	Valve de PEEP réglable 3-SET (5 / 7.5 / 10 cmH ₂ O), blanc	10
313-7730	Valve de PEEP réglable 5-SET (5 / 7.5 / 10 / 12.5 / 15 cmH ₂ O), gris	10



Système O2-MAX™ Fixed avec tuyau extensible (délivre une FiO₂ de 30%)

Référence	Description	Qté/bte
Les dispositifs ci-dessous sont fournis avec la valve de PEEP réglable 3-SET™		
313-7555XN	Système O2-MAX Fixed avec tuyau extensible, valve de PEEP réglable 3-SET, nébuliseur et masque BiTrac™ ED, grand adulte	10
313-7556XN	Système O2-MAX Fixed avec tuyau extensible, valve de PEEP réglable 3-SET, nébuliseur et masque BiTrac ED, moyen adulte	10
313-7555X	Système O2-MAX Fixed avec tuyau extensible, valve de PEEP réglable 3-SET et masque BiTrac ED, grand adulte	10
313-7556X	Système O2-MAX Fixed avec tuyau extensible, valve de PEEP réglable 3-SET et masque BiTrac ED, moyen adulte	10
Les dispositifs ci-dessous sont fournis avec la valve de PEEP réglable 5-SET™		
313-7554XN	Système O2-MAX Fixed avec tuyau extensible, valve de PEEP réglable 5-SET, nébuliseur et masque BiTrac ED, grand adulte	10
313-7557XN	Système O2-MAX Fixed avec tuyau extensible, valve de PEEP réglable 5-SET, nébuliseur et masque BiTrac ED, moyen adulte	10
313-7554X	Système O2-MAX Fixed avec tuyau extensible, valve de PEEP réglable 5-SET et masque BiTrac ED, grand adulte	10
313-7557X	Système O2-MAX Fixed avec tuyau extensible, valve de PEEP réglable 5-SET et masque BiTrac ED, moyen adulte	10

Système O2-MAX Trio (délivre une FiO₂ réglable à 30%, 60% ou 90%)

Référence	Description	Qté/bte
Les dispositifs ci-dessous sont fournis avec tuyau extensible et nébuliseur		
313-8018XN	Système O2-MAX Trio avec tuyau extensible, valve de PEEP réglable 5-SET, nébuliseur et masque BiTrac ED, grand adulte	10
313-8008XN	Système O2-MAX Trio avec tuyau extensible, valve de PEEP réglable 5-SET, nébuliseur et masque BiTrac ED, moyen adulte	10
Les dispositifs ci-dessous sont fournis avec tuyau intérieur lisse		
313-8018	Système O2-MAX Trio avec tuyau intérieur lisse, valve de PEEP réglable 5-SET et masque BiTrac ED, grand adulte	10
313-8008	Système O2-MAX Trio avec tuyau intérieur lisse, valve de PEEP réglable 5-SET et masque BiTrac ED, moyen adulte	10

Masque BiTrac ED avec serre-tête standard ou serre-tête CAP

Référence	Description	Qté/bte
313-7031	Masque BiTrac ED, extra grand adulte	10
313-7030	Masque BiTrac ED, grand adulte	10
313-7029	Masque BiTrac ED, moyen adulte	10
313-7028	Masque BiTrac ED, petit adulte	10
313-7031C	Masque BiTrac ED avec serre-tête CAP, extra grand adulte	10
313-7030C	Masque BiTrac ED avec serre-tête CAP, grand adulte	10
313-7029C	Masque BiTrac ED avec serre-tête CAP, moyen adulte	10
313-7028C	Masque BiTrac ED avec serre-tête CAP, petit adulte	10

Raccords oxygène jetables Quik-Connect™



Référence	Description	Qté/bte
313-11111	Quik-Connect avec couplage gaz Ohmeda, vert	30
313-12111	Quik-Connect avec couplage gaz Chemetron, vert	30
313-13111	Quik-Connect avec couplage gaz Puritan Bennett, vert	30
313-14111	Quik-Connect avec couplage gaz Schrader, vert	30
313-35111	Quik-Connect avec couplage gaz AGA, blanc	30
313-36111	Quik-Connect avec couplage gaz DIN, blanc	30
313-37111	Quik-Connect avec couplage gaz AFNOR, blanc	30
313-38111	Quik-Connect avec couplage gaz BS, blanc	30
313-39111	Quik-Connect avec couplage gaz UNI, blanc	30

ADAPT-2-VENT™

L'ADAPT-2-VENT est un adaptateur coudé permettant d'utiliser le masque BiTrac ED avec un circuit de respirateur mono ou double branche. Ceci permet au patient de migrer d'une CPAP, avec GO-PAP™ ou O2-MAX™, vers d'autres formes de ventilation sans changer d'interface patient.



313-9185



313-9186

Référence	Description	Qté/bte
313-9185	ADAPT-2-VENT Raccord coudé 30mmF sans fuite avec valve de sécurité	10
313-9186	ADAPT-2-VENT Raccord coudé 30mmF sans fuite standard	10