



InterGuide буж для проведения эндотрахеальных трубок InterForm стилет для интубации

Основное назначение - проведение интубации и замены эндотрахеальной трубки




Обеспечение проходимости дыхательных путей ▪ Аксессуары

InterGuide буж для проведения эндотрахеальных трубок

InterGuide - это гибкий проводник для эндотрахеальных трубок, известный также как буж. Он используется как проводник-направитель при интубации (особенно при трудной интубации) и как трубнообменник при замене эндотрахеальной трубки. На внешней поверхности проводника InterGuide нанесены метки глубины введения с шагом 100мм. Это одноразовое изделие, не содержит латекс, поставляется в стерильном виде в легко открывающейся индивидуальной упаковке.

Атравматичный дистальный наконечник типа coude

для снижения потенциальных травм пациента - небольшой изгиб, овальная форма

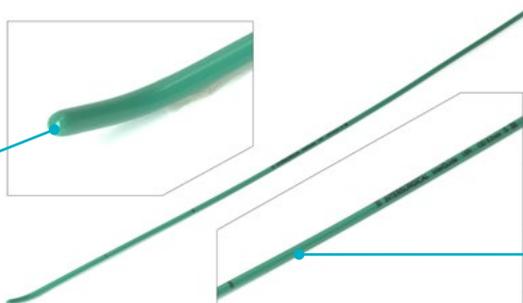

Поверхность с низким трением - низкофрикционный материал

Для легкого введения и проведения эндотрахеальной трубки

Оформить запрос


Код	Описание	Размер	Наружный диаметр (НД)	Длина	Количество в коробке
8070015	InterGuide буж для проведения эндотрахеальных трубок	15FR	5.0mm	700mm	10
8070010	InterGuide буж для проведения эндотрахеальных трубок	10FR	3.3mm	700mm	10
8070006	InterGuide буж для проведения эндотрахеальных трубок	6FR	2.0mm	530mm	10

InterForm стилет для интубации

InterForm представляет собой гибкий тонкий конфигурируемый стилет, который перед применением вводится в эндотрахеальную трубку до совмещения кончиков. Эта конструкция позволяет придавать трубке необходимую форму для облегчения введения. InterForm является одноразовым изделием, не содержит латекс, поставляется в стерильном виде в легко открывающейся индивидуальной упаковке.

Алюминиевый сердечник

Обеспечивает легкую конфигурацию ЭТ с введенным стилетом

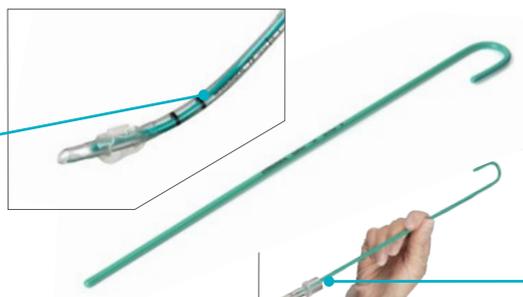

Поверхность с низким трением - низкофрикционный материал

Для легкого введения и проведения эндотрахеальной трубки

Оформить запрос

Код	Описание	Размер	Наружный диаметр (НД)	Длина	Количество в коробке
8080014	InterForm стилет для интубации	14FR	4.7mm	340mm	10
8080010	InterForm стилет для интубации	10FR	3.3mm	340mm	10
8080006	InterForm стилет для интубации	6FR	2.0mm	275mm	10

Все изделия поставляются в стерильном виде

IS6.5 • Issue 3 RU 10.15



ЗАО "Интерседжилал" 115114 Россия, Москва, Дербеневская наб, 11, корп В, офис 904
Т: +7 (495) 771-6809 info@intersurgical.ru www.intersurgical.ru

UK • Ireland • France • Germany • Spain • Portugal • Italy
Netherlands • Sweden • Denmark • Lithuania • Russia
Czech Republic • Turkey • South Africa • China • Japan
Taiwan • Philippines • USA • Colombia • Australia



Система качества Intersurgical отвечает требованиям ISO 14001, ISO 9001 и ISO 13485

Пожалуйста, подумайте, прежде чем печатать

Сберегите энергию и бумагу. Если распечатать это все-таки необходимо используйте двустороннюю печать